

Μεγεθυντικός Φακός επιτραπέζιος AFMA LED100 LF3 ή LF5 CROMO





€250.00 - €260.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Μεγεθυντικός φακός της Ιταλικής εταιρίας Afma, για εφαρμογές αισθητικής και δερματολογίας, ψυχρού φωτισμού Led, μεγέθυνσης X3 ή X 5, σκελετός χρωμίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Μεγεθυντικοί Φακοί](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

Variations

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μεγέθυνση Φακού	Price
-------	---------	--------------	----------------	-------------	-----------------	-------

Image	ΚΩΔΙΚΟΣ	Stock Status	Stock Quantity	Description	Μεγέθυνση Φακού	Price
	1937001X3-1	Άμεσα διαθέσιμο			x3	€295.00 <u>€250.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.
	1937001X5-1	Άμεσα διαθέσιμο			x5	€300.00 <u>€260.00</u> Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:

LED/EVO2 CRI > 90


Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός EVO2 BLACK της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X3 ή X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος άσπρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.

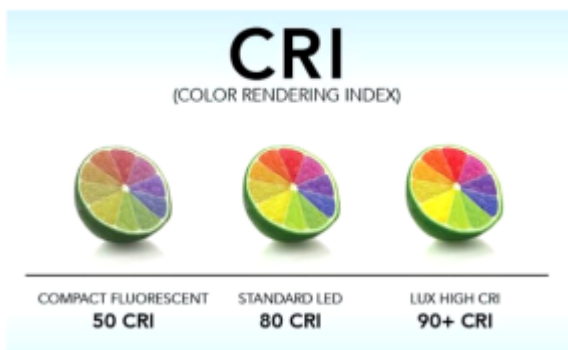

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για μεγεθυντικούς φακούς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ AFMA](#)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	5.700 κ.
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 0.80cm Π: 0.30cm Υ: 0.12cm
Bestseller Beauty	Ναι
Εγγύηση (Έτη)	2
Μεγέθυνση Φακού	x3, x5