

## Μεγεθυντικός Φακός επιτραπέζιος AFMA LED100 LF3 ή LF5 CROMO





**€250.00 - €260.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Μεγεθυντικός φακός της Ιταλικής εταιρίας Afma, για εφαρμογές αισθητικής και δερματολογίας, ψυχρού φωτισμού Led, μεγέθυνσης X3 ή X 5, σκελετός χρωμίου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Μεγεθυντικοί Φακοί](#), [Μεγεθυντικοί Φακοί](#) |

### Variations

| Image | ΚΩΔΙΚΟΣ | Stock Status | Stock Quantity | Description | Μεγέθυνση Φακού | Price |
|-------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
|-------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------|

| Image  | ΚΩΔΙΚΟΣ     | Stock Status    | Stock Quantity | Description | Μεγέθυνση Φακού | Price  |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--|
|  | 1937001X3-1 | Άμεσα διαθέσιμο |                |             | x3              | €295.00<br><u>€250.00</u><br>Τελική τιμή με Φ.Π.Α. |
|  | 1937001X5-1 | Άμεσα διαθέσιμο |                |             | x5              | €300.00<br><u>€260.00</u><br>Τελική τιμή με Φ.Π.Α. |

### Περιγραφή Προϊόντος

Ο δείκτης υψηλής απόδοσης χρωμάτων τεχνολογίας LED (Δείκτης απόδοσης χρωμάτων - CRI ) > 90 επιτρέπει στην

λάμπα να εκπέμπει φως που αντανακλά τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων χωρίς να τα παραμορφώνει.

Στην πραγματικότητα, ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων είναι μια τιμή που αλλάζει από 0 σε 100 και αντιπροσωπεύει

την ικανότητα μιας φωτεινής πηγής να επιστρέφει πιστά τα χρώματα ενός αντικειμένου.

Αυτός ο παράγοντας είναι μια παράμετρος που ζητείται όλο και περισσότερο, και κάνει τη διαφορά.

**ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ:**

LED/EVO2 CRI > 90


## Η ΝΕΑ ΛΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI > 90)

Τροχήλατος επαγγελματικός μεγεθυντικός φακός EVO2 BLACK της Ιταλικής εταιρίας Afma.

Ψυχρού φωτισμού Led και μεγέθυνσης φακού X3 ή X 5.

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας από σκελετό αλουμινίου χρώματος άσπρου.

Με βραχίονα που διευκολύνει την κίνηση στην επιθυμητή θέση γρήγορα και σταθερά.

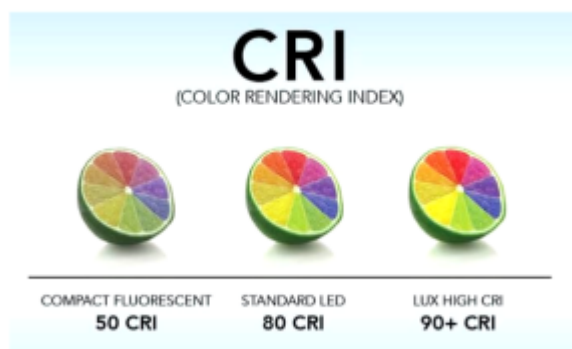

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 10W

Αριθμός Led : 7 High Power Star led

Χρώμα φωτός : 5000k σχεδόν λευκό φως

Φωτεινή ροή: 450 lumen

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI : 90 (οι πηγές φωτός LED με CRI 80+ είναι καλύτερες στην απόδοση χρώματος)

Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: 220 cm

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Βάρος φακού : 2,5 Kg

Κατασκευαστής : Afma



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για μεγεθυντικούς φακούς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για συσκευές αισθητικής](#) 

[ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ AFMA](#)

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Βάρος Συσκευασίας</b>      | 5.700 kg                      |
| <b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b> | M: 0.80cm Π: 0.30cm Υ: 0.12cm |
| <b>Bestseller Beauty</b>      | Ναι                           |
| <b>Εγγύηση (Έτη)</b>          | 2                             |
| <b>Μεγέθυνση Φακού</b>        | x3, x5                        |