

## CelaShape





Προηγμένη Τεχνολογία Μονοπολικής Ραδιοσυχνότητας. Δυνατότητα δυναμικής & στατικής θεραπείας σε πρόσωπο και σώμα.

Αποτελεσματική θεραπεία για Σύσφιξη, Λιποδιάλυση, Αδυνάτισμα, Διαμόρφωση.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#) |

## Φωτογραφίες

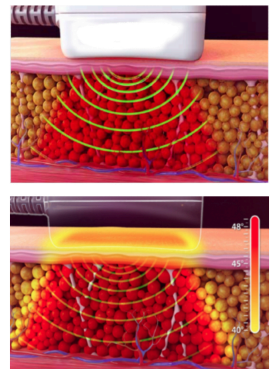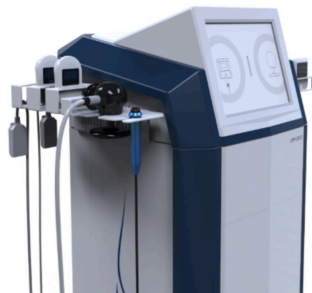

## Περιγραφή Προϊόντος

### Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα

Η μονοπολική ραδιοσυχνότητα του 1 MHz στοχεύει στην θερμική διέγερση των ινοβλαστών για φυσική ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης.

Τεχνολογία Χαμηλής συχνότητας και ομοιόμορφης διοχέτευσης της ενέργειας.

Βαθιά διείσδυση για καταπολέμηση του λιπώδη ιστού από την επιδερμίδα έως τον μυ.

Μη επεμβατική, χρήση τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας για τη μεταφορά ενέργειας στα λιποκύτταρα, τη θέρμανση τους, και τελικά την απόπτωση και απομάκρυνση τους από το σώμα.

Προκαλείται νέκρωση λιποκυττάρων από το χόριο έως και 1,5 cm σε βάθος.

Η θερμότητα φτάνει στο υποδόριο λίπος με το RF,

εξαλείφοντας έτσι έως και το 24% των λιποκυττάρων και μειώνοντας αποτελεσματικά το βάρος.

Οι 6 στατικές κεφαλές προσφέρουν το πλεονέκτημα μίας συνεδρίας που δεν απαιτεί παρουσία χειριστή (χωρίς δέσμευση προσωπικού).

Ενώ ταυτόχρονα η δυναμική κεφαλή με την επιλογή των δύο διαμέτρων καλύπτει όλο το εύρος των περιοχών προσώπου και σώματος για θεραπείες λιποδιάλυσης και σύσφιξης.

Η θερμοκρασία και η παροχή ενέργειας ρυθμίζεται αυτόματα ψηφιακά στους 43°C επιδερμικά (εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 0-60 C°), ενώ η θερμοκρασία του λιπώδους ιστού διατηρείται 3-4°C χαμηλότερη.

Πολλαπλές περιοχές μπορούν να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα σε συνεδρίες 30 λεπτών.

Κατά μέσο όρο, χρειάζονται περίπου 6-12 εβδομάδες για να φανούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

## **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**