

## IPL IP-Light



Σύστημα IPL (**SHR** - Super Hair Removal & **in Motion** - θεραπεία σάρωσης) τελευταίας γενιάς με υδρόψυκτο σύστημα ψύξης, Γερμανική λυχνία, 2 χρόνια εγγύηση, service, ανταλλακτικά, εκπαιδευτικό σεμινάριο χειρισμού. Για θεραπείες φωτοαποτρίχωσης, ανάπλασης, ευρυαγγειών, μελαχρώσεων, κηλίδων και σύσφιξης μαστού


**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [IP-Light](#), [Θεραπίες Προσώπου](#), [Θεραπίες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπίες Σώματος](#) |

## Φωτογραφίες



● Κεφαλή υψηλής ποιότητας με διπλό button χειρισμού


● Θερμοκρασία κεφαλής έως -13 °C

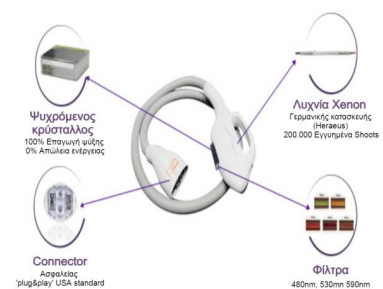

## Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή **IP-Light** είναι μια επιτραπέζια συσκευή IPL τελευταίας γενιάς (**SHR** - Super Hair Removal - **in Motion** (θεραπεία σάρωσης) με compact μοντέρνο σχεδιασμό και υδρόψυκτο σύστημα ψύξης που μας επιτρέπει να δουλεύουμε συνεχόμενα για ώρες. Το σύστημα συνδυάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία που κυκλοφορεί και τα οφέλη της μεθόδου του IPL. Ακόμη και οι τρίχες που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να αφαιρεθούν, τώρα πλέον μπορούν.

Με το σύστημα **IP-Light** μπορούμε εκτός από φωτοαποτρίχωση να εφαρμόσουμε και θεραπείες : ανάπλασης, ευρυαγγειών, μελαγχρώσεων, κηλίδων και σύσφιξης μαστού.

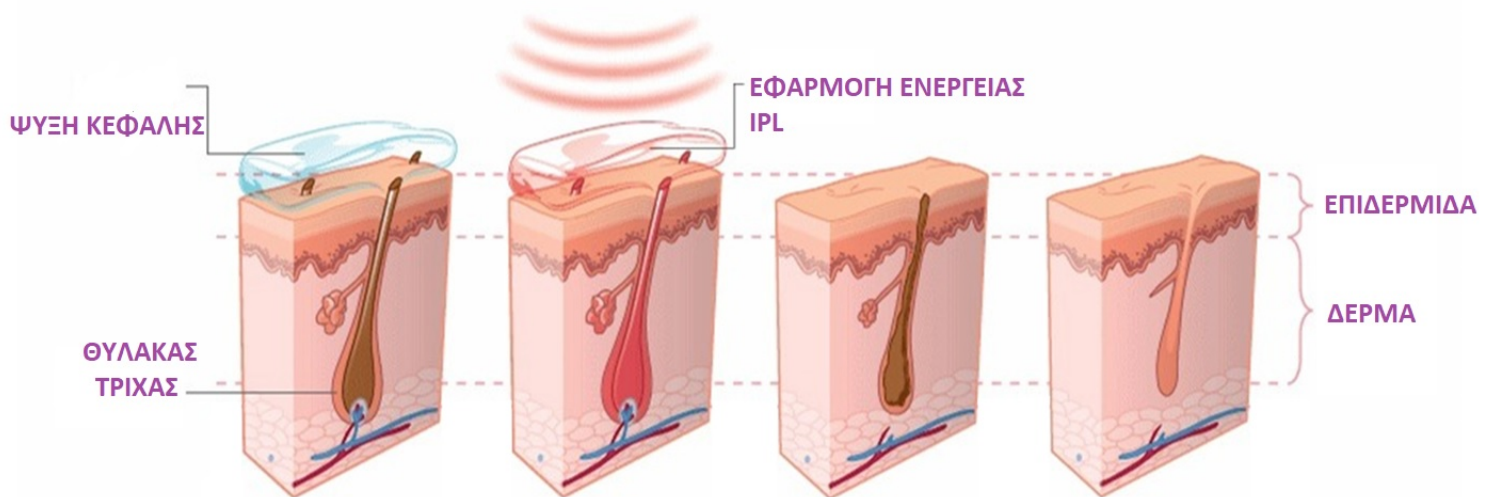

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η λυχνία **γερμανικής** προέλευσης μας δίνει εγγυημένα τουλάχιστον 200.000 χτυπήματα ελαχιστοποιώντας το κόστος εφαρμογής.

Με το σύστημα **in Motion** (θεραπεία σάρωσης) της συσκευής IP-Llight, η θεραπεία είναι πιο ευχάριστη από ότι με τα συμβατικά συστήματα IPL, λιγότερο χρονοβόρα και το δέρμα προστατεύεται καλύτερα.

Το πολυπαλμικό σύστημα λειτουργίας **SHR** - Super Hair Removal κάνει την εφαρμογή αρκετά ανώδυνη και γρήγορη (ταχύτητα έως 1 hz). Η λειτουργία **SHR** λειτουργεί θερμαίνοντας σταδιακά το χόριο σε μια θερμοκρασία που εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους θύλακες της τρίχας και αποτρέπει την εκ νέου ανάπτυξη, ενώ αποφεύγει τον τραυματισμό του περιβάλλοντος ιστού. Ένας υψηλός ρυθμός επανάληψης σύντομων παλμών χορηγείται βαθιά στο χόριο, επιτυγχάνοντας υψηλή μέση ισχύ και θεραπευτικά αποτελεσματική συσσώρευση θερμότητας χωρίς ουσιαστικά πόνο.

Η συσκευή διαθέτει ιδιαίτερα εργονομική και εύχρηστη κεφαλή με 2 διακόπτες λειτουργίας, και με ενημέρωση των αριθμών shoots που κάνουμε.

Η αλλαγή του μήκους κύματος για κάθε θεραπεία γίνεται μέσω των ειδικών φίλτρων της κεφαλής που αλλάζουν γρήγορα και εύκολα.

Το σύστημα ψύξης γίνεται από ψυγείο από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η Γερμανική αντλία νερού μας δίνει συνεχή και αθόρυβη λειτουργία.

- ◉ Εξαιρετική ποιότητα κεφαλής με 2 διακόπτες φλας
- ◉ Θερμοκρασία ψύξης έως  $-13^{\circ}\text{C}$



### ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

**Αποτρίχωση:** φίλτρο 640mm ~ 1200mm

**Αναζωογόνηση:** φίλτρο 530mm ~ 1200mm

**Αγγειακή θεραπεία:** φίλτρο 480mm ~ 1200mm


**Αφαίρεση χρωστικών:** φίλτρο 590mm ~ 1200mm

**Ενίσχυση μαστού:** φίλτρο 690mm ~ 1200mm

**ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ ΧΕΝΟΝ  
ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  
200.000 SHOOTS**




**5 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

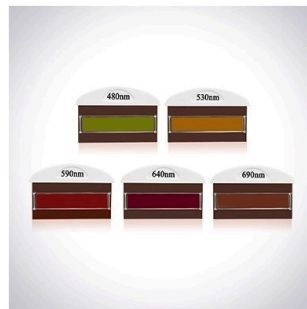

**ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  
ΑΘΟΥΡΒΗ  
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ**



**ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΨΥΞΗ**

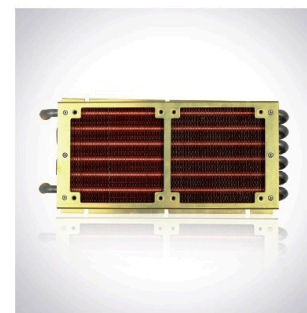

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Οθόνη	7.4 ιντσών έγχρωμη – αφής LCD screen
Σύστημα ψύξης	Υδροψυκτο
Ισχύς	1600 W
Ενέργεια IPL	1-50J/cm <sup>2</sup>
Συχνότητα IPL	1 - 4 sec
Παλμοί	1 - 6
Μήκος κύματος	480nm / 530nm / 590nm / 640nm / 690nm
Διαστάσεις κεφαλής	1,5 X 5,0 cm
Διαστάσεις συσκευής	40 X 42 X 37cm
Βάρος συσκευής	38kg

**Με τη αγορά της συσκευής IP-Light παρέχεται εκπαιδευτικό σεμινάριο χειρισμού και 2 χρόνια εγγύηση με δωρεάν service και ανταλλακτικά.**

**Επιπλέον Χαρακτηριστικά****Εγγύηση (Έτη)****2**